


Hifushape Slimming

Hifushape basiert auf hochfokussierter Ultraschalltechnologie (High Intensity Focused Ultrasound, kurz HIFU), bei der fokussierte und volumetrische Ultraschallenergie in subkutane Fettschichten in einer präzisierten Tiefe (1,2 cm) vordringt und so eine nicht-thermische Wirkung erzielt.

Beschreibung

Hifushape basiert auf hochfokussierter Ultraschalltechnologie (High Intensity Focused Ultrasound, kurz HIFU), bei der fokussierte und volumetrische Ultraschallenergie in subkutane Fettschichten in einer präzisierten Tiefe (1,2 cm) vordringt und so eine nicht-thermische Wirkung erzielt.

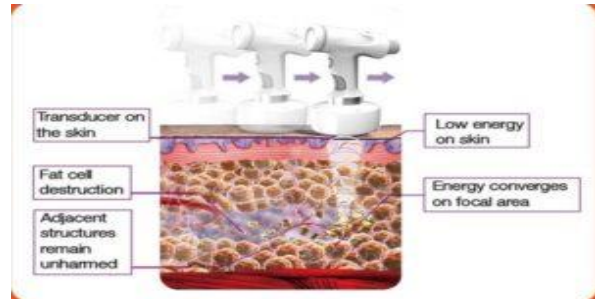

Die Technologie wird mithilfe eines Geräts für nicht-invasives Body Shaping übertragen, das von der US-amerikanischen FDA zugelassen wurde und gepulsten, fokussierten Ultraschall nutzt, um mechanisch (d. h. nicht-thermisch) und selektiv Fettzellen in einem bestimmten Schwerpunktbereich in der subkutanen Fettschicht zu zerstören, ohne die Haut, Blutgefäße, Nerven oder das Bindegewebe zu beschädigen, und weist auf diese Weise bereits nach zwei Wochen messbare Ergebnisse vor.

Diese einzigartige Technologie ist die Antwort auf den zunehmenden Bedarf der Patienten im Hinblick auf eine nicht-invasive Body-Shaping-Lösung, die keine Ausfallzeit und keine zumeist mit operativen Eingriffen assoziierten Komplikationen zur Folge hat.

Technische Daten:

- Eingangsleistung: 500 W
- Ausgangsleistung: 150 W
- Ausgabe Punktgröße: 1 cm²
- Fokalweite: 1,2 cm (von der Haut bis zum Schwerpunkt)
- Frequenz: 250 kHz \pm 2 %
- Energieniveau: 1 – 10 kontinuierlich regulierbar
- Pulsbreite: 0,5 s
- Verzögerungszeit: 0,5 – 3 s regulierbar
- Kühlsystem: Lüftung und Wasser
- Eingangsspannung: AC 220 V 50 Hz, AC 110 V 60 Hz
- Abmessungen: 93 x 35 x 45 cm
- Nettogewicht: 30 kg

Fakten:

- Sicherheit und Wirksamkeit anhand von mehr als 15 veröffentlichten Peer-Review-Abhandlungen und Buchbeiträgen klinisch belegt
- Lückenlose Umsetzung des Behandlungsprotokolls in nur 4 Wochen – 3 Behandlungen in Intervallen von zwei Wochen
- Mehr als 96 % der Patienten erzielen eine messbare Reduzierung und 94 % der Patienten waren mit den Ergebnissen zufrieden
- Mehr als 300'000 durchgeführte Behandlungen weltweit
Keine Quetschungen, Schwellungen oder Ausfallzeiten
- Komfortable, 45-minütige «Walk in, walk out»-Behandlung
- Einzigartiges Geschäftsmodell mit bemerkenswertem ROI

Preis:

Auf Anfrage – Barkauf, Leasing, Raten oder Miete möglich.